

OBSERVACIONS OBSERVACIONES

TELÈFONS D'INTERÈS TELÉFONOS DE INTERÉS

Si té cap dubte o problema, o si creu que els seus símptomes són anormals, podem ajudar-lo/la. No dubti a consultar amb el seu metge.

Si tiene alguna duda o algún problema, o si cree que sus síntomas son anormales, podemos ayudarle. No dude en consultar a su médico.

Dr.: _____ Tel.: _____

En cas que no el localitzi, pot trucar a:

En caso de no localizarlo, puede llamar a:

Servei d'Urgències Domiciliàries (SUD)

Servicio de Urgencias Domiciliarias (SUD) Tel.: 93 280 33 66

HOSPITAL DE BARCELONA Tel.: 93 254 24 00

Altres / Otros: _____

Desitgem que vostè i la seva família hagin tingut una estada confortable entre nosaltres.

Tots els professionals de l'hospital estem a la seva disposició per si ens necessita.

Deseamos que tanto usted como su familia hayan tenido una estancia confortable entre nosotros. Todos los profesionales del hospital estamos a su disposición por si nos necesita.



Revisat per / Revisado por:

O. Tarragó (infermera / enfermera)

J. Galí, C. Puig (metges traumatòlegs / médicos traumatólogos)

Revisió / Revisión:

Setembre 2014 / Septiembre 2014



SCIAS
Hospital de
Barcelona

www.scias.com

Guia informativa SCIAS de malalties i consells sanitaris

Immobilitzador d'espatlla tipus Gill-Christ

Guía informativa SCIAS de enfermedades y consejos sanitarios

Inmovilizador de hombro tipo Gill-Christ



93-25033 NOVATESA Gràfiques S.L. F.V. 09/14. 09/14

SCIAS Hospital de Barcelona



Indicacions

Aquest immobilitzador s'utilitza en lesions, traumàtiques o no, d'espatlla, d'avantbraç i de colze.

Components (Fig. 1)

- a) Suport del braç i cinta de suspensió
- b) Cinta immobilitzadora

Col·locació

1. Poseu el suport del braç i la cinta de suspensió en l'extremitat lesionada i adapteu-ho bé al voltant del colze. Ajusteu la llargada del suport doblegant-lo endins fins al canell. (Fig. 2)
2. Per mantenir el braç en la posició correcta, passeu la cinta de suspensió per l'anella central i, mitjançant el velcro, fixeuh-la a l'alçada necessària. Normalment, el colze ha d'estar en un angle de 90 graus. (Fig. 3)
3. Per immobilitzar l'espatlla, fixeuh un extrem de la cinta immobilitzadora a nivell del colze i passeu-la al voltant de l'esquena del pacient.
4. Fixeu l'altre extrem de la cinta immobilitzadora a l'altra anella. Ajusteu el cinturó i assegureu-vos que immobilitza l'extremitat

Indicaciones


Este inmovilizador se emplea en lesiones, traumáticas o no, de hombro, de antebrazo y de codo.

Componentes (Fig. 1)

- a) Soporte del brazo y cinta de suspensión
- b) Cinta inmovilizadora

Colocación

1. Sitúe el soporte del brazo y la cinta de suspensión en la extremidad lesionada y adapteho bien alrededor del codo. Ajuste el largo del soporte doblándolo hacia dentro hasta la muñeca. (Fig. 2)
2. Para mantener el brazo en la posición correcta pase la cinta de suspensión por la anilla central y, mediante el velcro fíjela a la altura necesaria. Normalmente, el codo debe estar en un ángulo de 90 grados. (Fig. 3)
3. Para inmovilizar el hombro, fije un extremo de la cinta inmovilizadora a nivel del codo y rodee con ella la espalda del paciente.
4. Fije el otro extremo de la cinta inmovilizadora a la otra anilla. Ajuste el cinturón y asegúrese de que inmoviliza la extremidad

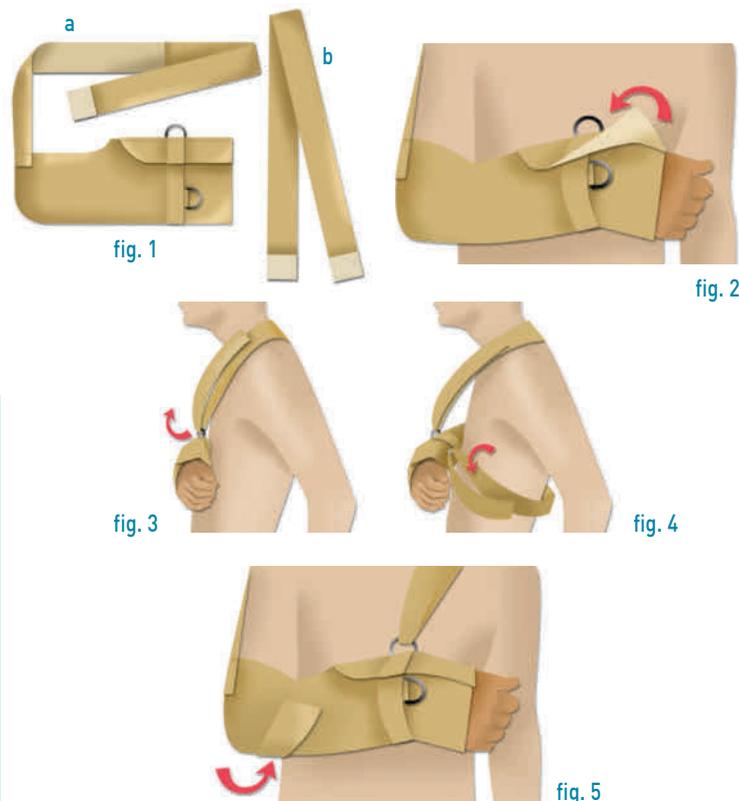

de forma segura i no massa incòmoda per a la persona lesionada. (Fig. 4)

Característiques

- Aquest sistema d'immobilització és molt còmode per al pacient i la seva col·locació i ajustament resulten senzills.
- L'immobilitzador d'espatlla tipus Gill-Christ pot emprar-se per a qualsevol de les dues extremitats superiors.
- Permet la mobilització de la mà i del canell.

Recomanacions

- No retireu l'immobilitzador fins que ho indiqui el metge.
- Preveniu la irritació de les aixelles i dels punts de fregament de l'immobilitzador: després de realitzar la higiene diària, eixgüeu bé la pell i apliqueu-hi midó de blat de moro (Maizena®).
- Comproveu el color, la temperatura, la mobilitat i la sensibilitat de la mà un cop col·locat el dispositiu i, en el cas que s'inflamin la mà o els dits de l'extremitat afectada, mobilitzeu els dits i comproveu que l'immobilitzador està col·locat correctament. Si havent corregit la col·locació de la cinta immobilitzadora no es produeix una millora, aviseu el metge.

de manera segura y no demasiado incómoda para la persona lesionada. (Fig. 4)

Características

- Este sistema de inmovilización es muy cómodo para el paciente y su colocación y ajuste resultan sencillos.
- El inmovilizador de hombro tipo Gill-Christ puede utilizarse para cualquiera de las dos extremidades superiores.
- Permite la movilización de mano y muñeca.

Recomendaciones

- No retire el inmovilizador hasta que su médico se lo indique.
- Prevenga la irritación de las axilas y los puntos de roce del inmovilizador: después de realizar la higiene diaria, séquese bien la piel y aplíquese almidón de maíz (Maizena®)
- Compruebe el color, la temperatura, la movilidad y la sensibilidad de la mano una vez colocado el dispositivo y, en caso de que se inflamen la mano o los dedos de la extremidad afectada, movilice los dedos y compruebe que el inmovilizador esté colocado correctamente. Si aún corrigiendo la colocación de la cinta inmovilizadora no notase ninguna mejora, avise a su médico.